

自來水直接連結型 超純水裝置



PURIC μ

操作方式直覺且易懂，管柱(Cartridge)交換作業也非常簡單。

搭載最佳機能，性價比表現超群。

優異的保養維護性能



低營運成本



無壓力的操作性



[標準功能]



記憶
採水量



漏水感應



警報裝置



超純水
Tank循環



Tank
自動給水

[選配功能]



Foot Switch



防菌對策用
採水口過濾器



防傾倒用
固定座

智慧型手機透過 AR 功能預覽 ※1

1 啟動手機
攝像功能讀取
QR code




2 點選按
鍵試擺
看看




設置示意圖

可360度
迴轉

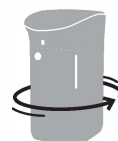


顯示實物
尺寸

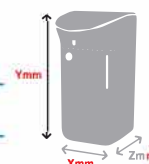

※1 依機種和軟體的版本，會有無法使用的情况

超純水製造流程

Flow

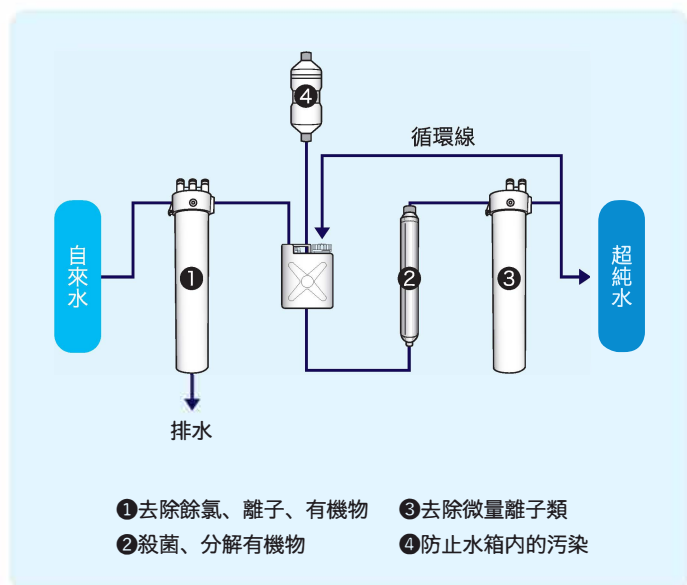

規格

Technical Spec

型號	PX-0060 μ -X00	PX-0060 μ -000
處理水質※1	18.2 M Ω · cm	
TOC值※1	5 ppb以下	—
採水速度	1.0 L/min	
UV燈	●	—
純水Tank	4.5 L(有効容量)	
純水製造能力	3.5 L/h	
本體尺寸	W290×D428×H598 mm	
運轉質量	約24 kg	
電源	AC100~240 V 單相 50/60 Hz共通 本體:DC24 V 60 VA	

※1 根據處理水水質會有所差異。不會顯示TOC值。

消耗品

Consumables

名稱	交換頻率※2
①管柱(Cartridge)	1 年
②氧化UV燈	1年半※3
③管柱(Cartridge)	6個月
④Air Vent Filter	6個月

※2 根據原水水質與使用量會有所差異。

※3 常時循環時更換頻率為8個月

給水條件

Water Supply Condition

原水	自來水(請使用以自來水基準為準則的水)
SDI	4以下
全硬度	參照技術計算值
SiO ₂ (Silica)	
TOC	1 mg/L以下
餘氯	1 mgCl/L以下
水温	5~35 °C
水壓	0.15~0.35 MPa (運轉時的水壓)
流量	15 L/h以上



奧璐佳璫科技股份有限公司

ORGANO TECHNOLOGY CO.,LTD.

※型錄的內容會未經預告而變更，敬請知悉。

※PURIC 是 ORGAN CORPORATION的註冊商標或商標

<https://www.organo.com.tw/>

●提供親切與優質服務的販售店●